



PRESENTACIÓN

El Agitador Magnético De Placa Calefactora Led DE 7" de Kyntel modelo MI0102005, es un instrumento que sirve para mezclar líquidos entre sí o con polvos, para producir soluciones, dispersiones fluidas o viscosas, así como suspensiones. Este equipo, además, posee un sistema de calentamiento que lo hace mucho más versátil. Los agitadores magnéticos son importantes para reducir el riesgo de contaminación ya que sólo entran en contacto con una barra magnética en la muestra y los componentes del instrumento son fáciles de limpiar. Si desean reproducir una mezcla durante mucho tiempo, este tipo de agitador es la mejor opción.

AGITADOR MAGNETICO DE PLACA CALEFACTORA LED DE 7" MODELO MI0102005

CARACTERÍSTICAS

- Alta precisión y con temporizador: el control del programa PID optimizado proporciona una precisión alta de temperatura y velocidad. Proporciona un calentamiento rápido y garantiza un funcionamiento continuo durante mucho tiempo. El temporizador de proceso digital permite un funcionamiento sin supervisión y se puede configurar desde 0-99h59 m.
- Excelente calefacción: la temperatura es de hasta 510 °C y el acero inoxidable con placa calefactora con revestimiento cerámico permite una conducción inmediata del calor y una transferencia óptima del mismo.
- Fuerte agitación: la velocidad es de hasta 1500 rpm. La potente capacidad de agitación soporta una gran cantidad de agitación de hasta 5 l y se puede garantizar un funcionamiento estable.
- Alta seguridad: advertencia de superficie caliente en la visualización LED para evitar quemaduras; la temperatura de seguridad de 50-550 °C proporciona protección contra sobretemperatura; diseño de placa calefactora cerrada reduce el riesgo de salpicaduras de líquido en el equipo.
- Durable: diseño robusto de carcasa de aluminio y motor DC sin escobillas no requiere mantenimiento y a prueba de explosiones. El acero inoxidable con placa calefactora con revestimiento cerámico puede ser resistente a altas temperaturas, impactos y choques térmicos.
- LED digital puede mostrar tanto la velocidad como el valor establecido de temperatura/valor real.




Contenido del paquete:

- 1x agitador con calefactor.
- 1x barra de agitación magnética.
- 1x cable de alimentación.
- 1x sensor de temperatura externo PT1000.
- 1x manual de usuario.
- 1x destornillador plano.



¿QUÉ INCLUYE EL PAQUETE?

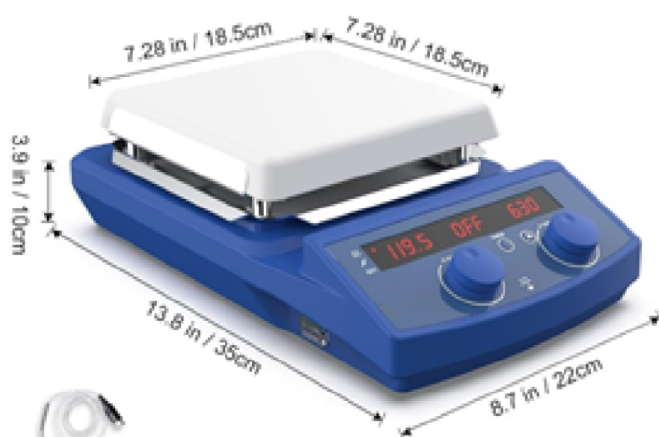

Sensor de temperatura
PT1000



Destornillador
plano



Barra de
agitación
magnética



Cable de
alimentación