

KYNTEL



AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOBREMESA CLASE C/ IMPRESORA DE 23L - MOD. BKM-K23N - KYNTEL

Descripción

La serie de esterilizadores BKM-K18/23N es un esterilizador de nivel Descarga el aire frío en la cámara de esterilización por desplazamiento de gravedad, satura el vapor interno y alcanza la presión y temperatura establecidas. Para lograr el propósito de esterilizar los artículos a esterilizar. Adecuado para estomatología, oftalmología, belleza, quirófano y otros lugares. Es adecuado para la esterilización de cristalería, utensilios de metal desnudo e instrumentos sólidos no encapsulados.

Protección de seguridad


Protección automática contra sobretemperatura, protección antisequedad del tubo calefactor, dispositivo de enclavamiento de seguridad, doble protección contra sobretensión, protección de seguridad contra fugas de sobreintensidad, protección de detección de puerta.

Características técnicas

- Material de alta calidad: La cámara de esterilización está fabricada en acero inoxidable electro pulido de alta calidad.
- Método de generación de vapor: El cuerpo principal se calienta, no se requiere una fuente de vapor externa.
- Interfaz de operación: La pantalla a color capacitiva de 3,5 pulgadas se utiliza para mostrar la presión, la temperatura, la hora, la alarma, el código y otra información en tiempo real, lo cual es conveniente para que los usuarios observen. Cuando finaliza el ciclo de esterilización, sonará un zumbador.
- Registro de esterilización: Interfaz USB estándar, impresora opcional, registro de datos del programa.
- Nuevo estante de almacenamiento: aumenta el espacio de utilización de la cámara de esterilización y el espacio de selección para la carga de esterilización es más grande.
- Sistema de control: controlado por microcomputadora de un solo chip, control automático de calentamiento, esterilización y escape, sin demasiada operación manual.
- Inicio de una tecla en el panel de operación, usando teclas mecánicas, el número de acciones $\geq 100,000$ veces.



Pantalla LCD

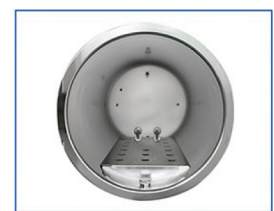


Cámara



Puerto USB



Bandeja

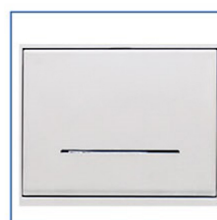

MODELO	BKM-K23N
Capacidad	23L
Puerta	Manual
Presión de diseño	0.28Mpa
Presión de funcionamiento	0.23Mpa
Temp. de funcionamiento	121/134°C
Material de la cámara	S30408
Fuente de alimentación	AC220± 10% ,50/60 hZ (standard) 110V, 60Hz (opcional)
Consumo	1.8Kw
Altura	≤2500m
Tamaño de la cámara(φ*L)	φ250*450mm
Accesorios de serie	Bandeja y puerto USB
Accesorios opcionales	Impresora
Tamaño externo (An*L*Al)	700*495*410mm
Tamaño del empaque (An*L*Al)	810*610*590mm
Peso Neto(Kg)	36
Peso bruto (Kg)	50